

MIPAR 製品版インストール方法(Windows 版)

プログラム(MIPAR)のインストール

ダウンロードページを開きます。

<https://www.lightstone.co.jp/mipar/learning.html#10>

※Windows 版を選択して、インストールプログラム


MIPAR_vXXXX_InstallPack_Win.exe をダウンロードして下さい。

(XXXX はバージョン名です)

インストールプログラムの実行


ダウンロードしたインストールプログラムをダブルクリックして実行します。

最初に、右の Agreement ダイアログが開きますので、「I accept the agreement」を選択して、「Next」をクリックします。

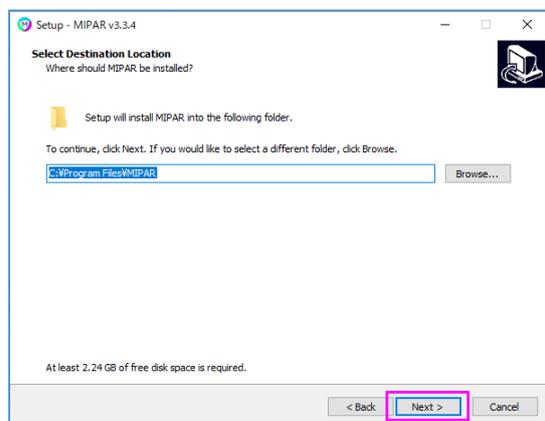



デスクトップにショートカットアイコンを作成する場合は、チェックを入れてください。

「Next」をクリックして進みます。

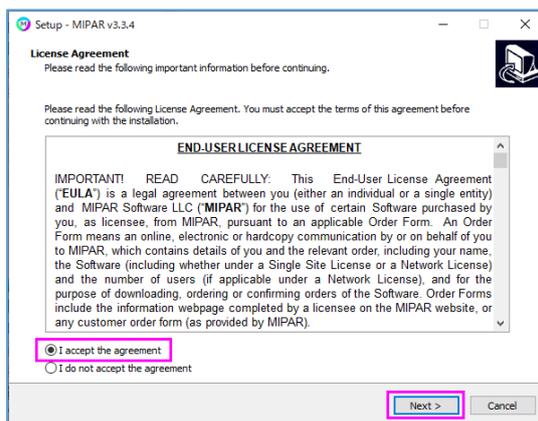


展開先のフォルダパスを指定して、「Next」をクリックします。
※保存先の変更はなるべく行わないでください。

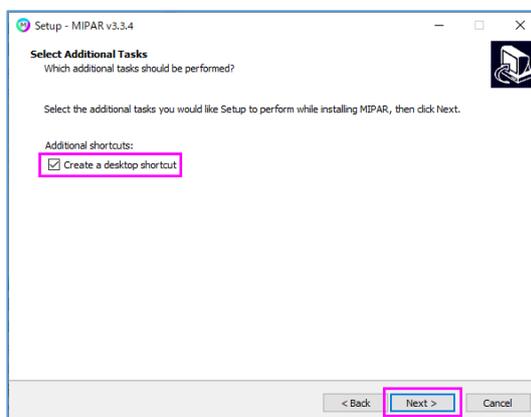

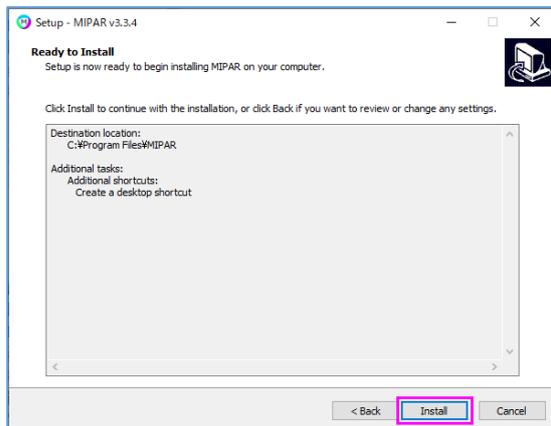


「Install」をクリックして進みます。

インストールの完了まで数分かかります。インストールプロセスが止まってしまったように見えますが、「Finish」が表示されるまでお待ちください。

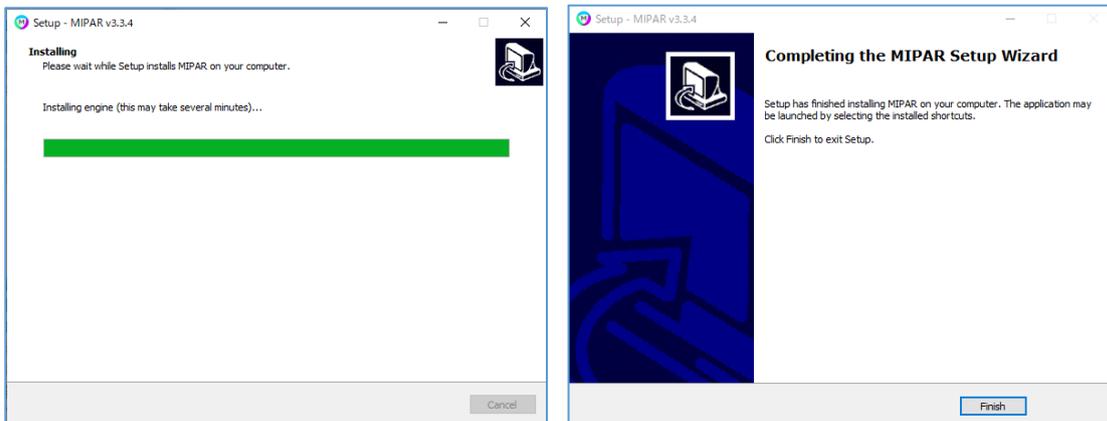

「Finish」をクリックして頂きましたら、インストールは完了です。

ショートカットアイコンなどから、MIPAR を起動します。

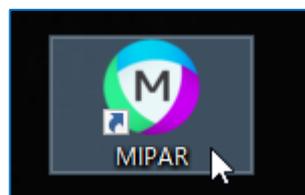


ライセンス取得に進みます。↓

ライセンス認証の操作

ライセンスの種類を選びます。PC 固定のライセンスの場合は「Local」をクリックします。「Network License」の方は別途ご相談ください。

Note:これ以降の操作には、
インターネット接続が必要です。


Activate License 画面が開きますので、「Online Activation」を選択します。MIPAR の納品時にライトストーンからご連絡しているプロダクトキーを入力し、「Activate」ボタンを押してください。

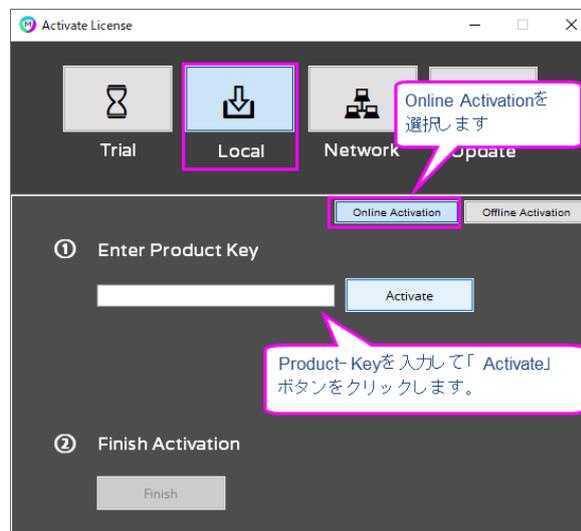

① 「Activation Successful」と表示されましたら、「Finish」ボタンをクリックします。

以上で MIPAR のインストールとライセンス認証は完了しました。

次回以降は、Windows のスタートメニューやデスクトップのショートカットから MIPAR を起動できます。

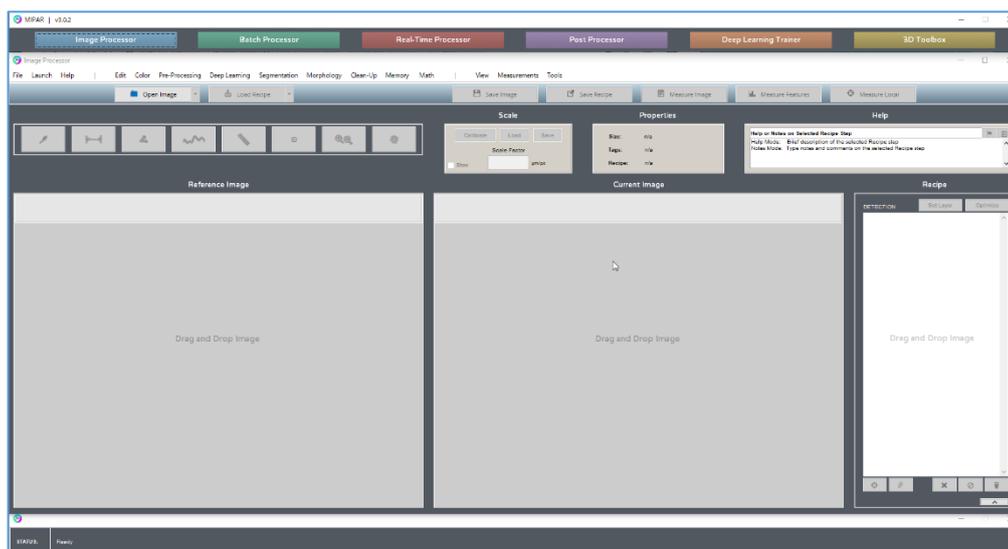

Note:


Online Activation が成功しない場合、または MIPAR を利用する PC が Web に接続されていない場合のライセンス認証方法をご案内します。

Activation License の画面を開き、
「Offline Activation」を選択します。


「Save Fingerprint」をクリックして、
ライセンスキーを取得する
PC の情報を C2V ファイルとして
保存します。

Note:

他の PC で Product-Key の入力を行う場合には、他の PC に
FingerPrint の C2V ファイルを
移動します。

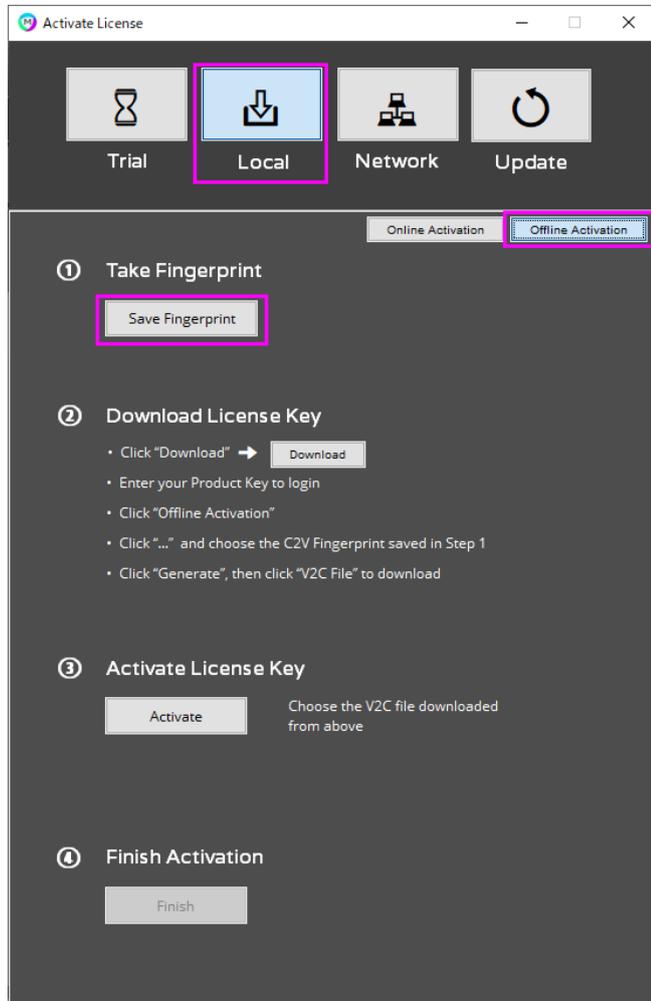

「Download」ボタンを押すと、Product-Keyを入力するWebページがブラウザソフトで開きます。

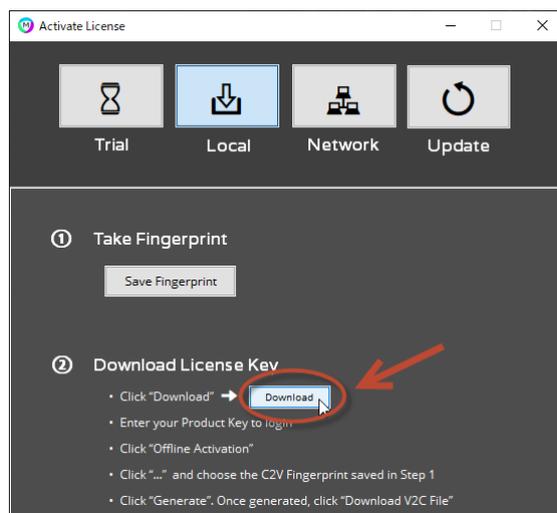

Note:


他のPCでライセンスファイルを手入手する場合には、次のページを他のPCで開きます。

<http://activate.mipar.us/ems/customerLogin.html>

ブラウザソフトでプロダクトキー (Product Key)を入力するページが表示されたら、納品時にライトストーンからご連絡しているプロダクトキーを入力し、「Login」ボタンを押してください。




ライセンス管理を行うページに移動しますので、右上にある「Offline Activation」をクリックして進みます。

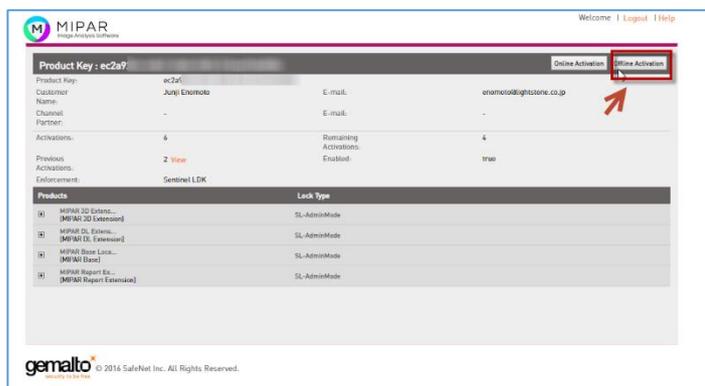


「Upload C2V」欄の「…」ボタンをクリックし、事前に保存したC2Vファイルを選択します。

選択後に「Generate」ボタンを押すと、ライセンスキーファイル（V2C）が生成されます。

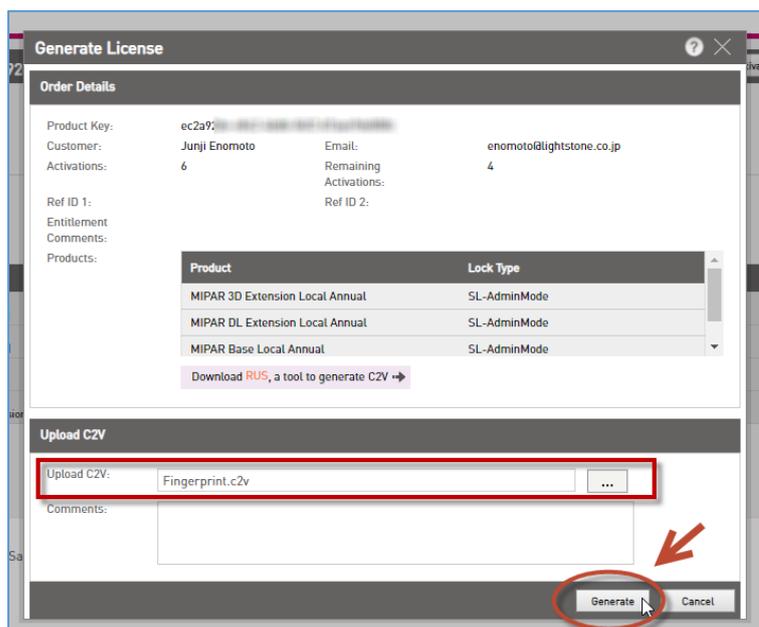


「Download V2C File」のリンクをクリックすると、ライセンスキー（V2C）ファイルがダウンロードされます。適当なフォルダに名前を変えずにそのまま保存してください。

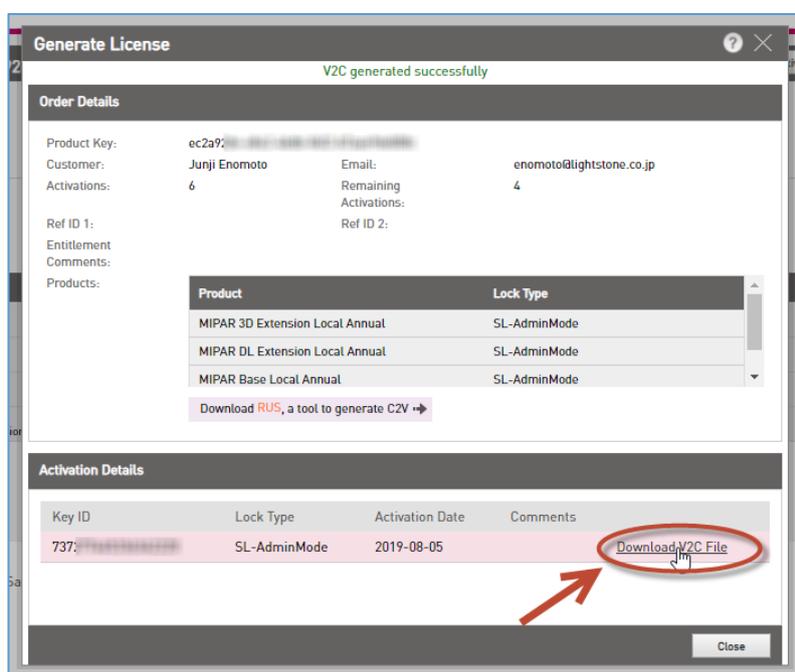

Note:


別の PC でこのファイルを入手した場合は、MIPAR をインストールする PC に、この V2C ファイルを移動してください。

MIPARの「Activate License」のウィンドウに戻り、「Activate」ボタンをクリックしてください。

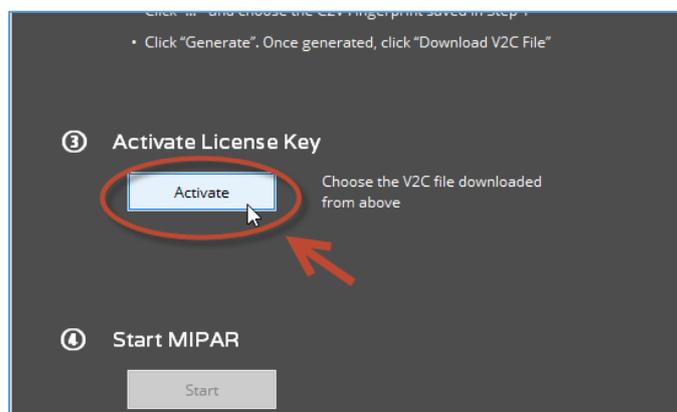

保存したライセンス（V2C）ファイルを選び、「開く」ボタンをクリックします。

「Start」ボタンをクリックし、MIPAR を起動してください。

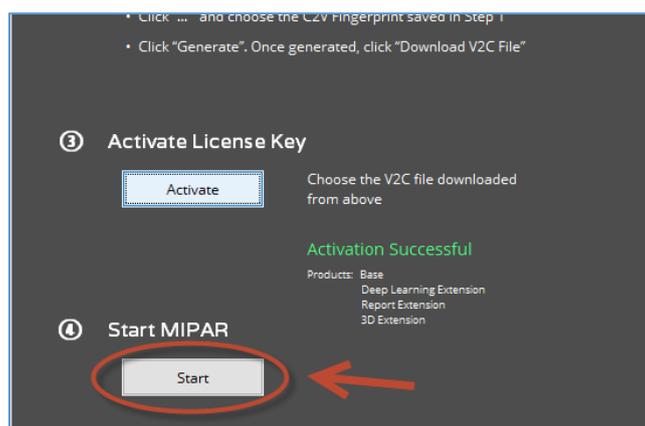

ご不明な点がございましたら、下記テクニカルサポートまでご連絡ください。

株式会社ライトストーン

MIPAR テクニカルサポート

Eメール: tech@lightstone.co.jp

Tel: 03-3864-5212 (平日: 9時~18時)

Fax: 03-3865-0050